

STYLO BENEPAI[®]

GUIDE D'ADMINISTRATION

**Stylo prérempli
BENEPAI[®] pour
auto-injection**

 **Benepali[®]**

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité

Commencer ici → Se préparer pour l'injection

Avant de vous injecter BENEPAI®, veuillez consulter la notice et en particulier le mode d'emploi qui se trouve à la fin et qui contient des informations importantes. La notice contient des informations sur le risque de réactions allergiques ou d'effets indésirables, ainsi que sur les situations au cours desquelles il ne convient pas d'utiliser BENEPAI®.


Comment injecter BENEPAI® avec le stylo BENEPAI®

Rassembler tous les éléments dont vous avez besoin

Prévoir une surface propre, bien éclairée, et rassembler tout le matériel nécessaire suivant :



Un stylo auto-injecteur prérempli BENEPAI® contient 50 mg d'étanercept (sortir du réfrigérateur et le retirer de son emballage)

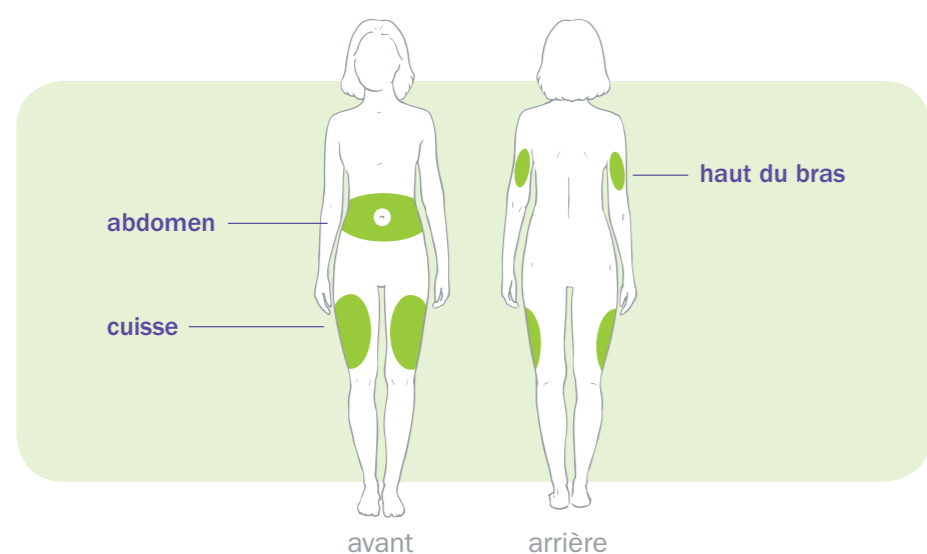

Examiner avec attention le stylo BENEPAI®

Ne pas utiliser le stylo pré-rempli si la date de péremption est dépassée.

Ne pas utiliser le stylo s'il est tombé sur une surface dure, car ses composants internes pourraient être endommagés.

Ne pas secouer le stylo.

Ne pas utiliser le stylo si le capuchon bleu de protection d'aiguille n'est pas solidement fixé.

Examiner la solution

Contrôler à travers la *fenêtre de visualisation*. Le médicament doit être limpide ou légèrement opalescent, incolore ou jaune pâle, et peut contenir de petites particules de protéine blanches ou quasi transparentes.

Ne pas utiliser le médicament s'il est décoloré, trouble, ou si des particules, autres que celles décrites ci-dessus, sont présentes.

Placer le médicament à température ambiante

Retirer un stylo prérempli du réfrigérateur et patienter 30 minutes pour le laisser atteindre la température ambiante. Cela facilite l'injection du médicament.

Tenir hors de la portée des enfants.

Ne pas utiliser de sources de chaleur, telles qu'un micro-ondes ou de l'eau chaude, pour chauffer le médicament.

Ne pas retirer le capuchon bleu de protection d'aiguille.



Attendre 30 minutes avant d'utiliser le médicament

Choisir le site d'injection

Le stylo BENEPAI® est destiné à une injection sous-cutanée. L'injection doit être effectuée dans la cuisse, dans l'abdomen (à une distance minimale de 5 cm du nombril) ou à l'arrière du bras.

Changer de site d'injection à chaque injection.

Ne pas injecter au niveau d'une zone rouge, dure, blessée ou sensible, ni sur une cicatrice ou une vergeture.

Si vous avez du psoriasis, **ne pas** injecter sur des zones de peau gonflées, épaisses, rouges, sur des plaques ou sur des lésions.

→ Injection avec le stylo BENEPAI®



Étape 1 :

Se laver les mains avec de l'eau et du savon.




Étape 2 :

Site d'injection propre

Nettoyer la peau au niveau du site d'injection avec une compresse imbibée d'alcool.

Ne pas toucher cette zone à nouveau avant l'injection.

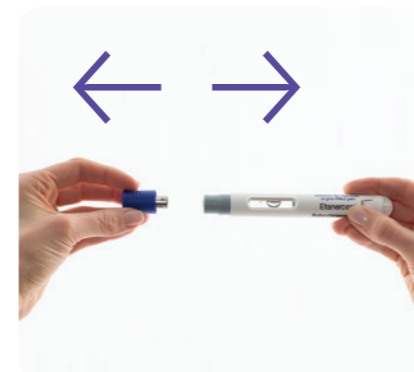

Étape 3 :

Retirer la protection de l'aiguille

Tirer la protection bleue de l'aiguille pour l'enlever.

Ne pas tordre ni plier le capuchon bleu de protection d'aiguille lorsque vous l'enlevez pour éviter d'endommager l'aiguille.

Ne jamais replacer le capuchon bleu de protection sur l'aiguille après l'avoir enlevé.

Jeter la protection dans le collecteur pour objets piquants et/ou tranchants.



Étape 4 :

Étirer la peau et placer le stylo

Étirer doucement la peau au niveau du site d'injection.

Positionner le stylo BENEPAI® à un angle d'environ 90° par rapport à la surface de la peau.

Ne pas pincer la peau.

Attendre 2 clics pendant que vous maintenez le stylo fermement appuyé sur la peau



Étape 5 :

Appuyer fermement pour commencer

Saisir fermement le stylo BENEPAI® et appuyer au niveau du site d'injection pour commencer l'injection (il n'y a aucun bouton à enfoncer).

Le stylo émettra un **premier clic** au début de l'injection. Ne pas retirer le stylo à ce moment-là.

Maintenir le stylo fermement appliqué au niveau du site d'injection.

Vous entendrez un **deuxième clic**.

Continuer à appuyer pendant 15 secondes



Étape 6 :

Compter doucement jusqu'à 15 après avoir entendu le 2^e clic

Après avoir entendu le **deuxième clic**, compter **doucement jusqu'à 15** tout en continuant à maintenir le stylo au niveau du site d'injection pour terminer l'injection.

Ne pas relâcher la pression au niveau du site d'injection ni bouger le stylo BENEPAI® avant que l'injection ne soit terminée.

Contrôler l'apparition de la tige jaune du piston



Étape 7 :

Retirer et vérifier

Après injection, retirer le stylo du site d'injection.

Le protecteur d'aiguille couvrira totalement l'aiguille.

Vérifier que la tige jaune du piston apparaît dans la fenêtre de visualisation afin de vous assurer que toute la dose a été administrée.

Élimination

Jeter le stylo BENEPAI® vide dans un collecteur agréé pour les objets piquants et/ou tranchants.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.



Examiner le site d'injection

Si le site d'injection saigne, presser une compresse de gaze au niveau du site d'injection.

Ne pas frotter le site d'injection.

Si nécessaire, couvrir à l'aide d'un pansement.

Élimination des déchets

1. Qu'est-ce que les DASRI ?

Vous réalisez vous-même vos injections, attention : vous êtes responsable de l'élimination de vos déchets !

En effet, certains de vos déchets présentent un risque pour vous-même et pour toute autre personne susceptible d'entrer en contact avec. On appelle ainsi DASRI les Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux. Ils incluent les aiguilles et tout matériel piquant, coupant ou perforant potentiellement contaminé par des agents biologiques pathogènes représentant alors un risque d'infection.

Dans le cadre de votre traitement en auto-injection, vous devez vous munir de boîtes à aiguilles (ou collecteurs) pour vous aider à éliminer comme il se doit les seringues et aiguilles usagées.

En aucun cas les DASRI ne doivent être mélangés et jetés avec les ordures ménagères. Seuls les cotons, lingettes antiseptiques et autres fournitures peuvent être jetées à la poubelle.

2. Comment se procurer ces boîtes à aiguilles ?
Ces boîtes à aiguilles sont disponibles gratuitement dans les pharmacies, sur présentation de votre ordonnance.

3. Comment utiliser les boîtes à aiguilles ?
- Rangez les boîtes à aiguilles hors de portée des enfants.
- Ne pas remplir la boîte à aiguilles au-delà du trait supérieur.
- Lorsque la boîte est pleine, vous devez la fermer définitivement.
- Le délai de stockage de la boîte à aiguilles ne doit pas dépasser 3 mois.

4. Où faut-il rapporter les boîtes à aiguilles ?
Rapportez la boîte à aiguille fermée à un point de collecte.

Pour connaître les points de collecte les plus proches, renseignez vous auprès de votre pharmacien/médecin, de votre mairie, sur le site internet <http://nous-collectons.dasri.fr> ou au numéro vert 0 800 664 664

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.



Des questions ?

Consulter votre médecin ou votre infirmier/ère.
Consulter la **notice et le mode d'emploi**.

Veillez consulter **la notice** accompagnant le stylo BENEPAI® avant de l'utiliser et chaque fois que votre ordonnance est renouvelée, car il est possible que de nouvelles informations y apparaissent. Ce **guide d'administration** n'est pas destiné à remplacer la notice d'utilisation accompagnant le stylo BENEPAI®.

Ne pas essayer de réaliser vous-même l'injection si vous n'avez pas été, au préalable, formé(e) à cette fin par votre médecin ou votre infirmier/ère. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance.

www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.